


adentta.az



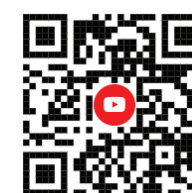

Stomatoloqlar üçün istifadəsi asan, pasiyentlər üçün isə rahat olan effektiv məhsulları daim inkişaf etdiririk.

World Bio Tech

- + Müştəri məmnuniyyəti bizim əsas prioritetimizdir
- + Qabaqcıl texnologiyalar və yüksək keyfiyyətli məhsullar hazırlamağa çalışırıq
- + Həyat keyfiyyətinizi yüksəldən WORLD BIO TECH ilə tanış olun

MÜNDƏRİCAT

ORTHODONTIC BRACKETS & TUBES

SELPRO A
Self-Ligating
active
Ceramic Bracket



SELPRO P
Self-Ligating
passive
Ceramic Bracket



BIJOU & X.O
Monocrystalline
Sapphire
Ceramic Bracket



DELICATE
Metal
Bracket



A1
Buccal Tube
Bondable



ARCH WIRES

SMART
Arch
Wire



MULTI BUTTON

**MULTI
BUTTON**



ATTACHMENTS

ATTACHMENTS



ELASTICS

**ELASTIC
Intraoral**



ELASTOMERICS

STRIPS

FIX CREW™

**CONTROL
CHAIN**



**OTO
STRIPS**
IPR
System



FIX CREW™
Orthodontic
Screw
System



Sertifikat




GMP



ISO 13485



CE

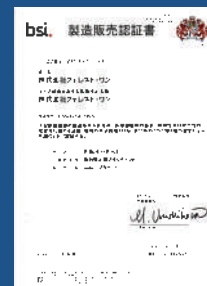

PMDA



NMPA



Prof. Kee-Joon Lee
Yonsei Universitetinin Stomatologiya
Kolleci Ortodontiya kafedrası
Yonsei Universitetinin Stomatoloji Xəstəxanasının
professoru tərəfindən hazırlanmışdır.

Dəqiq öz-özünə bağlanan keramika breket sistemi


“Öz-özünə bağlanan keramika breketlərdə detallar böyük əhəmiyyət daşıyır.”



Control Product




Selpro A

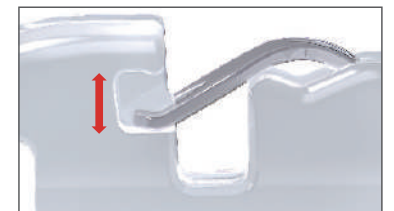


Clip Play minimization

- ▶ Klips və breketin dəqiq uyğunluğu deformasiyanı azaldır, möhkəmliyi artırır
- ▶ Dar klips boşluğu telin etibarlı fiksasiyasını təmin edir və klipsin açılmasının qarşısını alır
- ▶ Minimum klips boşluğu rotasiya və tork üzərində daha dəqiq nəzarət yaradır
- ▶ Dəqiq klips yuvası və qalınlaşdırılmış breket qanadları qırılma riskini azaldır

Bracket Wing Thickness Comparison

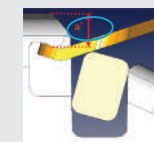


[Control Product]

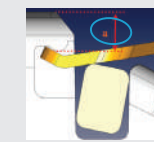


[Selpro A]

$a' < a$
Wing Thickness
(13% Improvement in
Wing strength)

Torque Play Simulation

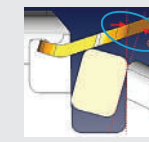

[Control Product Torque Play]

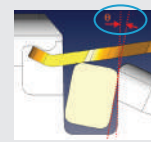

[Selpro A Torque Play]

$\theta' > \theta$
Loss Angle
(8° Advantage with
SelproA)

$\theta' > \theta$
Loss Angle
(8° Advantage with
SelproA)

ROTH .018 / .022

	Tooth	Torque	Ang	.018 slot	.022 slot
Maxillary	Central	12°	5°	SCAB-R18-11,21	SCAB-R22-11,21
	Lateral	8°	9°	SCAB-R18-12,22	SCAB-R22-12,22
	Cuspid with Hook	-2°	11°	SCAB-R18-13H,23H	SCAB-R22-13H,23H
	1 st Bicuspid with Hook	-7°	0°	SCAB-R18-145H,245H	SCAB-R22-145H,245H
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°	SCAB-R18-145H,245H	SCAB-R22-145H,245H
Mandibular	Anteriors	0°	0°	SCAB-R18-3412	SCAB-R22-3412
	Cuspid with Hook	-11°	7°	SCAB-R18-33H,43H	SCAB-R22-33H,43H
	1 st Bicuspid with Hook	-17°	0°	SCAB-R18-34H,44H	SCAB-R22-34H,44H
	2 nd Bicuspid with Hook	-22°	0°	SCAB-R18-35H,45H	SCAB-R22-35H,45H
Patient Kit	3X3			SCAB-R18-U3L3	SCAB-R22-U3L3
	5X5			SCAB-R18-U5L5	SCAB-R22-U5L5

MBT .022


	Tooth	Torque	Ang	.022 slot
Maxillary	Central	17°	4°	SCAB-M22-11,21
	Lateral	10°	8°	SCAB-M22-12,22
	Cuspid with Hook	0°	8°	SCAB-M22-13H, 23H
	1 st Bicuspid with Hook	-7°	0°	SCAB-M22-145H, 245H
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°	SCAB-M22-145H, 245H
Mandibular	Anteriors	-6°	0°	SCAB-M22-3412
	Cuspid with Hook	0°	3°	SCAB-M22-33H, 43H
	1 st Bicuspid with Hook	-12°	2°	SCAB-M22-34H, 44H
	2 nd Bicuspid with Hook	-17°	2°	SCAB-M22-35H, 45H
Patient Kit	3X3			SCAB-M22-U3L3
	5X5			SCAB-M22-U5L5

Açılması



Açma alətinin ucunu breket gövdəsi ilə qapağın arasına yerləşdirin və qapağı açmaq üçün aşağı doğru təzyiq edin.

Bağlanması

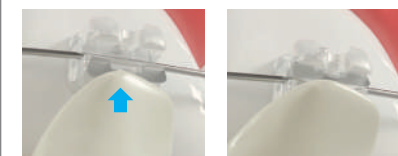

Teli slota yerləşdirdikdən sonra qapağı alət və ya barmağınızla tam bağlanana qədər yuxarı doğru itələyin.


Açma aləti



P181
klips açma aləti




Klipsin açılıb-bağlanma sınağı

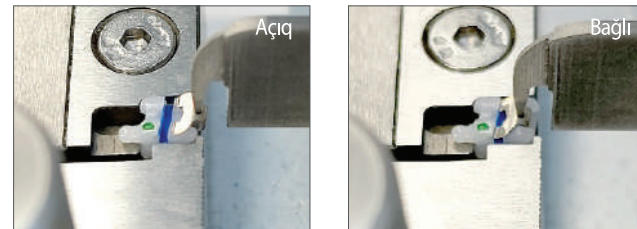


Rəqəmsal itələmə və çəkmə ölçüm cihazı

- Klips teli müqayisə qrupuna nisbətən daha güclü saxlayır
- Təkrar açılıb-bağlanma zamanı klipsin saxlama gücü qorunur
- Tel dəyişdirilərkən klipsin deformasiyaya uğramasının qarşısı alınır
- Təkmilləşdirilmiş klips dizaynı telin davamlı və etibarlı fiksasiyasını təmin edir

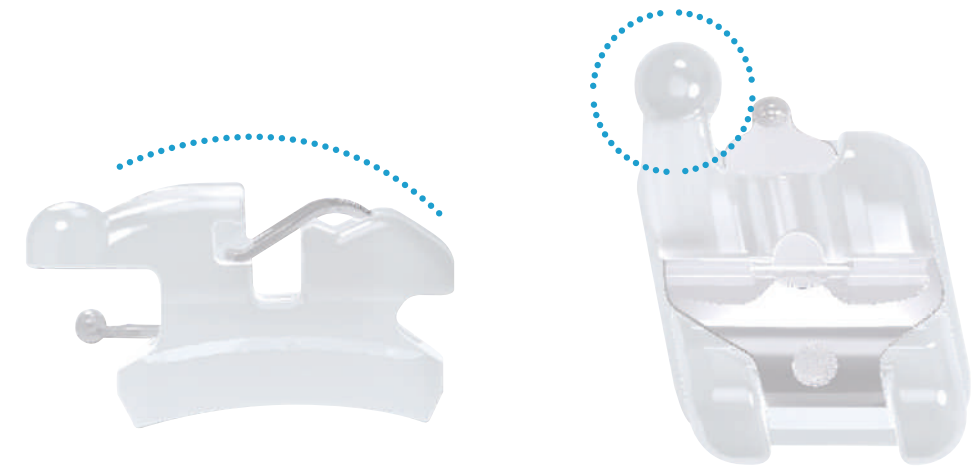


- Yumru gövdə, qanadlar və kürə formalı qarmaq
 - ▷ Kürə formalı qarmaq ağız toxumaları ilə təması minimuma endirir
 - ▷ Yumrulaşdırılmış dizayn narahatlıq və ağrı hissini azaldır

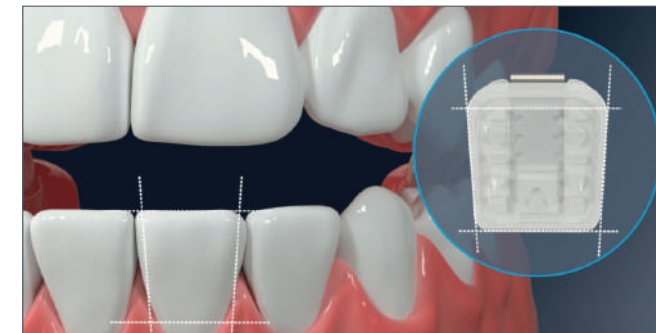




- Aşağı ön dişlərin anatomiyasına uyğun dizayn
 - ▷ Romb formalı baza diş səthinin anatomiyasına uyğunlaşdırılıb
 - ▷ Qonşu dişlərlə təması qarşısını alır və breketlərarası məsafəni qoruyur

Clip Operability Test Result

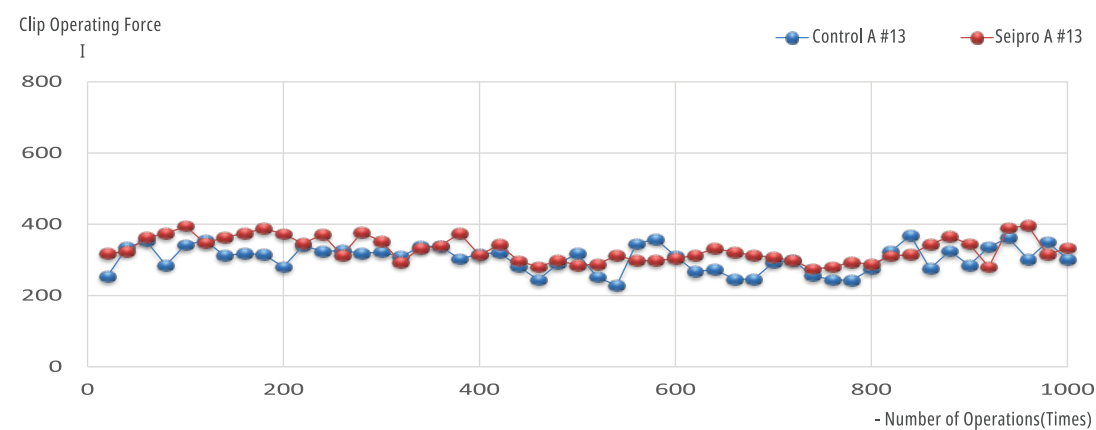

	Control A	Selpro A
Avg.	304 gf.	329 gf.
Max.	369 gf.	396 gf.
Min.	228 gf.	274 gf.
Standard Deviation	37 gf.	35 gf.

Testing Institution: KCL
(Korea Institute of Construction and Living Testing)

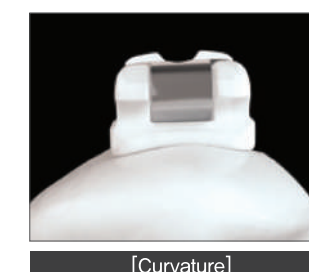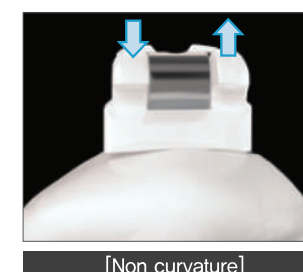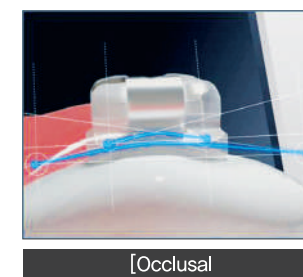

- Diş səthinə uyğun ayrilik
 - ▷ Baza dişlərin oklüzal və gingival səth ayriliklərinə uyğun hazırlanıb
 - ▷ Köpək və premolyar dişlərin rotasiyasına daha dəqiq nəzarət etməyə imkan verir
 - ▷ Diş səthinə uyğunluğu artıraraq sabit yapışma və dəqiq qüvvə ötürülməsi təmin edir



Prof. Kee-Joon Lee
Prof. Kee-Joon Lee Yonsei Universitetinin
Stomatologiya Kolleci Ortodontiya kafedrası
Yonsei Universitetinin Stomatoloji Xəstəxanasının
professoru Kee-Joon Lee tərəfindən hazırlanmışdır.

Dəqiq öz-özünə bağlanan keramika breket sistemi

“Öz-özünə bağlanan keramika breketlərdə detallar böyük əhəmiyyət daşıyır.”



► Gücləndirilmiş rotasiya nəzarəti

► Nəzarət qrupu ilə müqayisədə 15–43% daha yüksək rotasiya nəzarət momenti təmin edir.

ROTH .022

	Tooth	Torque	Ang	.022 slot
Maxillary	Central	12°	5°	SCPB-R22-11,21
	Lateral	8°	9°	SCPB-R22-12,22
	Cuspid with Hook	-2°	11°	SCPB-R22-13H,23H
	1 st Bicuspid with Hook	-7°	0°	SCPB-R22-145H,245H
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°	SCPB-R22-145H,245H
Mandibular	Anteriors	0°	0°	SCPB-R22-3412
	Cuspid with Hook	-11°	7°	SCPB-R22-33H,43H
	1 st Bicuspid with Hook	-17°	0°	SCPB-R22-344H
	2 nd Bicuspid with Hook	-22°	0°	SCPB-R22-345H
Patient Kit	3X3			SCPB-R22-U3L3
	5X5			SCPB-R22-U5L5

MBT .022

	Tooth	Torque	Ang	.022 slot
Maxillary	Central	17°	4°	SCPB-M22-11,21
	Lateral	10°	8°	SCPB-M22-12,22
	Cuspid with Hook	0°	8°	SCPB-M22-13H,23H
	1 st Bicuspid with Hook	-7°	0°	SCPB-M22-145H, 245H
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°	SCPB-M22-145H, 245H
Mandibular	Anteriors	-6°	0°	SCPB-M22-3412
	Cuspid with Hook	0°	3°	SCPB-M22-33H,43H
	1 st Bicuspid with Hook	-12°	2°	SCPB-M22-34H,44H
	2 nd Bicuspid with Hook	-17°	2°	SCPB-M22-35H,45H
Patient Kit	3X3			SCPB-M22-U3L3
	5X5			SCPB-M22-U5L5

Passiv öz-özünə bağlanan keramika breket



► Rotasiya itkisinin minimuma endirilməsi

- Keramik qapağın eni artırılaraq telin meyillənməsi və rotasiya itkisi azaldılır
- Rotasiya itkisi azaldıqca effektiv işləmə bucağı genişlənir

► CAE struktur analizinə əsaslanan dayanıqlı qapaq konstruksiyası


- Tel yükünə davamlılığı artırən PPC strukturu qapağın ayrılmaya qarşı möhkəmliyini yüksəldir

► Toxunma hissi təmin edən UBH/DBH strukturu

- Patentli UBH/DBH strukturu qapağın daha rahat və hiss olunan şəkildə açılıb-bağlanmasını təmin edir


	Selpro P	Control U	Control S	Control D
Cap Width	3.76 mm	3.43 mm	1.81 mm	1.50 mm
Eq.	Selpro P Moment 15% compared to Control U 35% compared to Control S 43% compared to Control D * Selpro P eyni yük altında dişlərin daha geniş bucaq diapazonunda rahat rotasiyasına imkan verir.			



Qapağın qopma qüvvəsinin ölçülmə üsulu

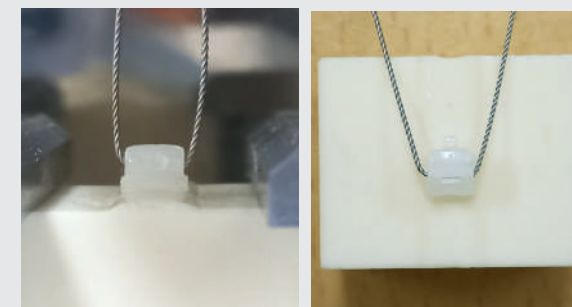


Sınaq müəssisəsi: KCL — Koreya Tikinti
və Məişət Sınaqları İnstitutu

Qapağın qopma qüvvəsinin ölçmə nəticələri

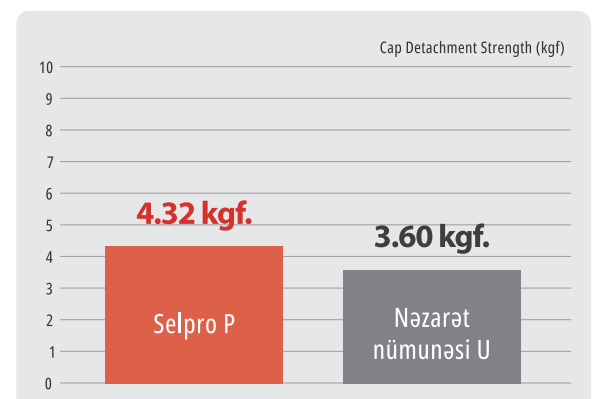

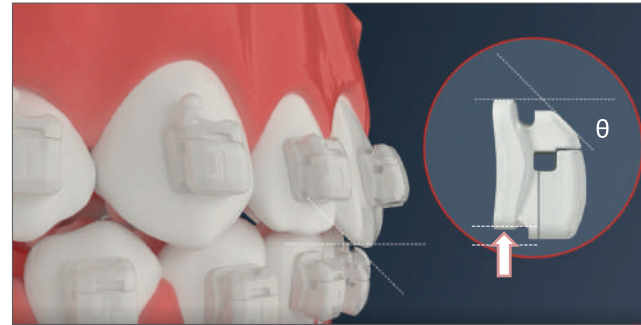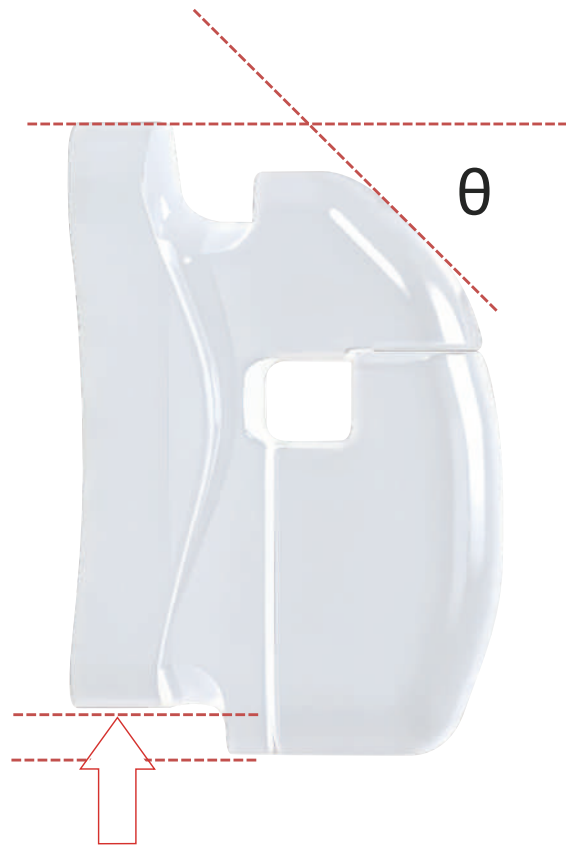

- Təhlükəsiz overbite–overjet dizaynı
 - ▷ Aşağı çənə breketinin maili qanad quruluşu üst ön dişlərlə təması minimuma endirir
 - ▷ Baza dizaynı breketin aşağı ön dişlərdə düzgün yerləşdirilməsini asanlaşdırır

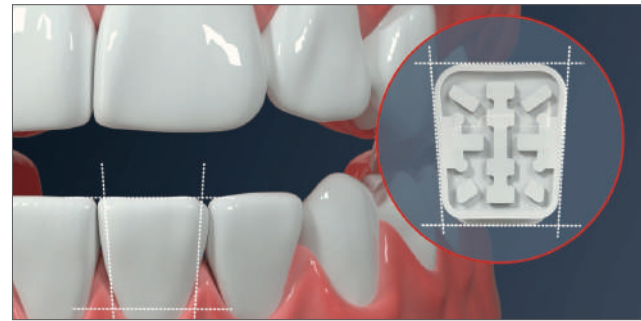

- Aşağı ön dişlərin anatomiyasına uyğun dizayn
 - ▷ Romb formalı baza diş səthinin anatomiyasına uyğun hazırlanıb
 - ▷ Qonşu dişlərlə təmasın qarşısını alır və breketlərarası məsafəni qoruyur

Açılması



Açma alətinin ucunu breket gövdəsi ilə qapağın arasına yerləşdirin və qapağı açmaq üçün aləti təxminən 40° çevirin

Bağlanması




Teli slota doğru basın, sonra qapağı alət və ya barmağınızla “klik” səsi eşidilənədək itələyin. Bu səs qapağın tam bağlandığını göstərir.

Açma və bağlama alətləri




P182
Açma aləti


P183
Bağlama aləti

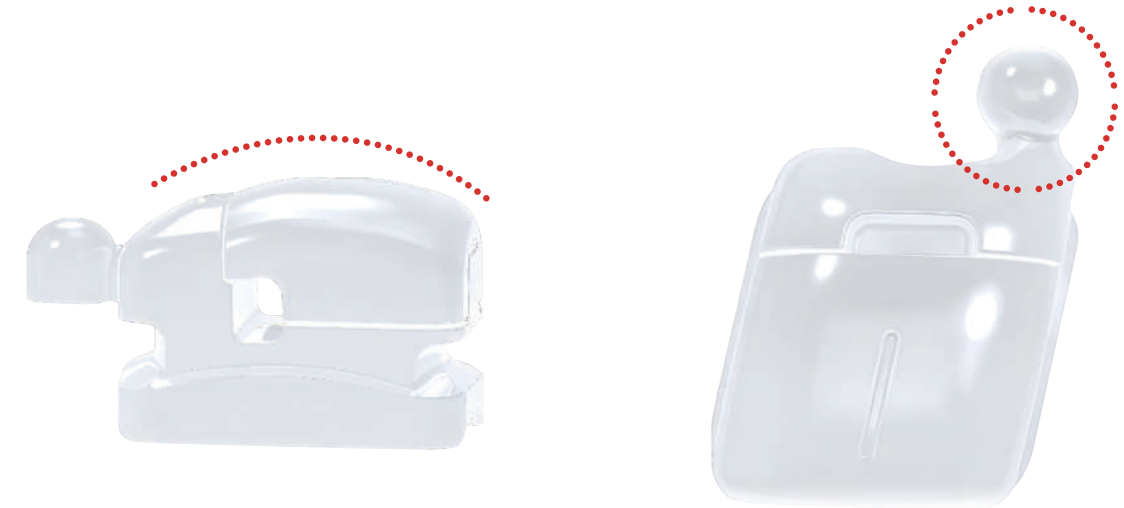


- Rahat kürə uclu qarmaq
 - ▷ Kürə uclu qarmaq ağızdaxili toxumalarla təması minimuma endirir
 - ▷ Hamarlanmış səth narahatlıq və ağrı hissini azaldır

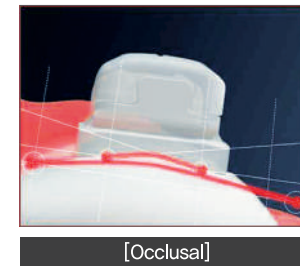

[Occlusal]

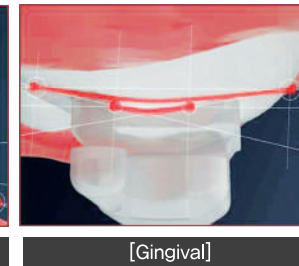



[Gingival]

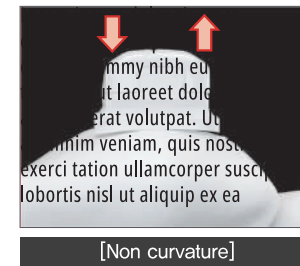

[Non curvature]



[Curvature]

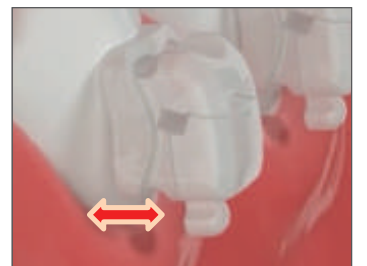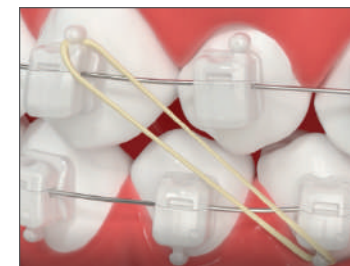

- Diş ayrılığına dair qlobal məlumat bazası
 - ▷ Müxtəlif diş anatomiyalarına əsaslanan geniş məlumat bazası yaradılıb
 - ▷ Dişlərin oklüzal və gingival istinad oxlarına uyğun orta ayrılıq göstəriciləri tətbiq edilib
 - ▷ Diş səthinə uyğun ayrılıq köpək və premolyar dişlərin rotasiyasının tənzimlənməsini asanlaşdırır

- Simulyasiya analizi ilə hazırlanmış liqatura yivi
 - ▷ Elastiklərin daha rahat bağlanmasını təmin edir
- Aşağı çənə üçün maili mərkəzi qarmaq
 - ▷ Maili quruluş diş əti ilə təması minimuma endirir
 - ▷ Premolyarlarda qarmağın mərkəzdə yerləşdirilməsi ağız daxilində narahatlıq və ağrı hissini azaldır



Selpro P istifadə edilərkən nəzərə alınmalı məqamlar

Slotun mövqeyi

Slot breket gövdəsinin yuxarı hissəsinə doğru bir qədər maili olduğundan, breketi yapışdırmazdan əvvəl onun mövqeyini diqqətlə yoxlayın. Ortodontik tellərin ardıcılığı

Ortodontik tel ardıcılığı

Tork və rotasiyanın düzgün tənzimlənməsi tam ölçülü tellərin slota daha rahat yerləşdirilməsinə imkan verir.

Qapağın açılması

Qapağı açarkən breketin və slotun mövqeyini nəzərə alaraq uyğun alətdən istifadə edin. Qeyd: Orijinal materialda “Qapağın açılması” bölməsinin mətni əvvəlki bölmə ilə təkrarlanıb.

Qapağın bağlanması

Teli, xüsusilə düzbucaqlı tel istifadə edilərkən, slota tam yerləşdirdikdən sonra qapağı bağlayın. Bunun üçün xüsusi alətdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Qapağın öz-özünə açılması

Tel slota tam yerləşdirilmədən qapaq bağlanarsa, qapaq yenidən açıla və ya zədələna bilər. Bağlanarkən mütləq “klik” səsinin eşidildiyinə əmin olun.

Qapağın tam bağlanmaması

Qapaq bağlanmırsa, əvvəlki ölçülü telə qayidin və ya həmin diş O-ring ilə liqaturaya alın. Növbəti qəbulda vəziyyəti yenidən yoxlayın.

Qapağın və ya qanadın qırılması

Aşağı ön dişlərdə üst dişlərlə vaxtından əvvəl təması qapağın və ya breket qanadının qırılmasına səbəb ola bilər.



Bijou

- Yumrulaştırılmış dizayn pasiyent narahatlığını azaldır
- Baza səthinin 70%-ni əhatə edən örtük diş minasını qoruyur
- Monokristal sapfir yüksək estetik görünüş təmin edir
- Plazma-silika örtüyü telin rahat sürüşməsinə və qırılmaya davamlılığı artırır



Bijou

ROTH .018 / .022

	Tooth	Torque	Ang	.018 slot	.022 slot
Maxillary	Central	12°	5°	BJB-R18-11,21	BJB-R22-11,21
	Lateral	8°	9°	BJB-R18-12,22	BJB-R22-12,22
	Cuspid with Hook	-2°	11°	BJB-R18-13H,23H	BJB-R22-13H,23H
	1 st Bicuspid with Hook	-7°	0°	BJB-R18-14H,24H	BJB-R22-14H,24H
	1 st Bicuspid without Hook	-7°	0°	BJB-R18-14,24	BJB-R22-14,24
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°	BJB-R18-15H,25H	BJB-R22-15H,25H
Mandibular	2 nd Bicuspid without Hook	-7°	0°	BJB-R18-15,25	BJB-R22-15,25
	Anteriors	0°	0°	BJB-R18-3412	BJB-R22-3412
	Cuspid with Hook	-11°	7°	BJB-R18-33H,43H	BJB-R22-33H,43H
	1 st Bicuspid with Hook	-17°	0°	BJB-R18-34H,44H	BJB-R22-34H,44H
	1 st Bicuspid without Hook	-17°	0°	BJB-R18-34,44	BJB-R22-34,44
	2 nd Bicuspid with Hook	-22°	0°	BJB-R18-35H,45H	BJB-R22-35H,45H
Patient Kit	3X3			BJB-R18-300	BJB-R22-300
	5X5			BJB-R18-500(H)	BJB-R22-500(H)

MBT .018 / .022

	Tooth	Torque	Ang	.018 slot	.022 slot
Maxillary	Central	17°	4°	BJB-M18-11,21	BJB-M22-11,21
	Lateral	10°	8°	BJB-M18-12,22	BJB-M22-12,22
	Cuspid with Hook	0°	8°	BJB-M18-13H,23H	BJB-M22-13H,23H
	1 st Bicuspid with Hook	-7°	0°	BJB-M18-14H,24H	BJB-M22-14H,24H
	1 st Bicuspid without Hook	-7°	0°	BJB-M18-14,24	BJB-M22-14,24
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°	BJB-M18-15H,25H	BJB-M22-15H,25H
Mandibular	2 nd Bicuspid without Hook	-7°	0°	BJB-M18-15,25	BJB-M22-15,25
	Anteriors	-6°	0°	BJB-M18-3412	BJB-M22-3412
	Cuspid with Hook	0°	3°	BJB-M18-33H,43H	BJB-M22-33H,43H
	1 st Bicuspid with Hook	-12°	2°	BJB-M18-34H,44H	BJB-M22-34H,44H
	1 st Bicuspid without Hook	-12°	2°	BJB-M18-34,44	BJB-M22-34,44
	2 nd Bicuspid with Hook	-17°	2°	BJB-M18-35H,45H	BJB-M22-35H,45H
Patient Kit	3X3			BJB-M18-300	BJB-M22-300
	5X5			BJB-M18-500(H)	BJB-M22-500(H)

Crimpable Hook
(open) Ball type
4.0mm



DBS Metal
Button



Button with
hook Left



Bracket Wax



Separation Ring




LP Tube 7 Roth
MBT





Power Chain
Grey / Clear



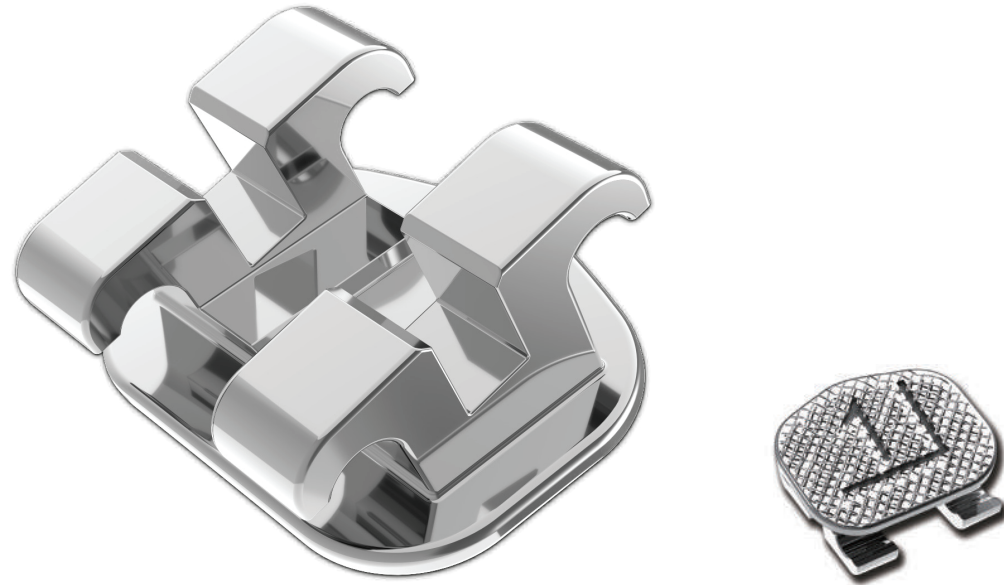

- Yumru qanad dizaynı pasiyent rahatlığını artırır
- Kiçik ölçüsü və aşağı profili pasiyent rahatlığını artırır
- CNC emalı slotun yüksək dəqiqliyini təmin edir
- Baza üzərindəki lazer işarələmə breketin aid olduğu nahiyyənin asan müəyyən edilməsinə imkan verir

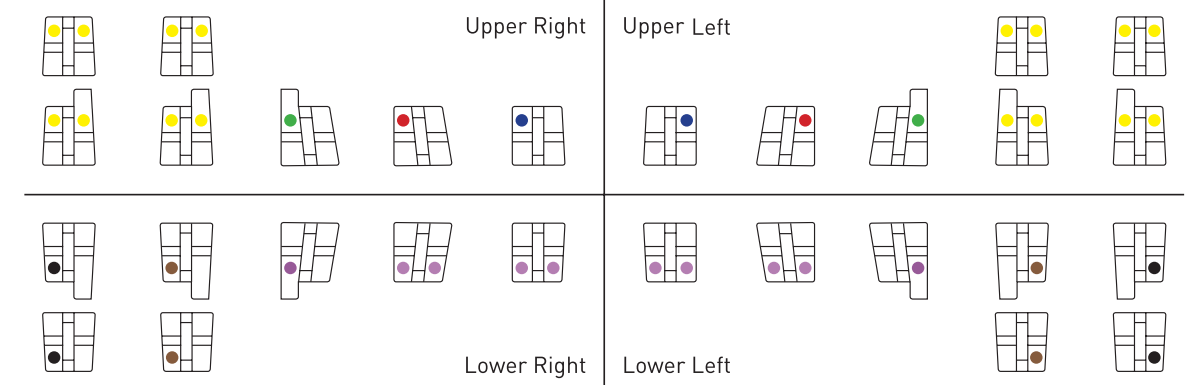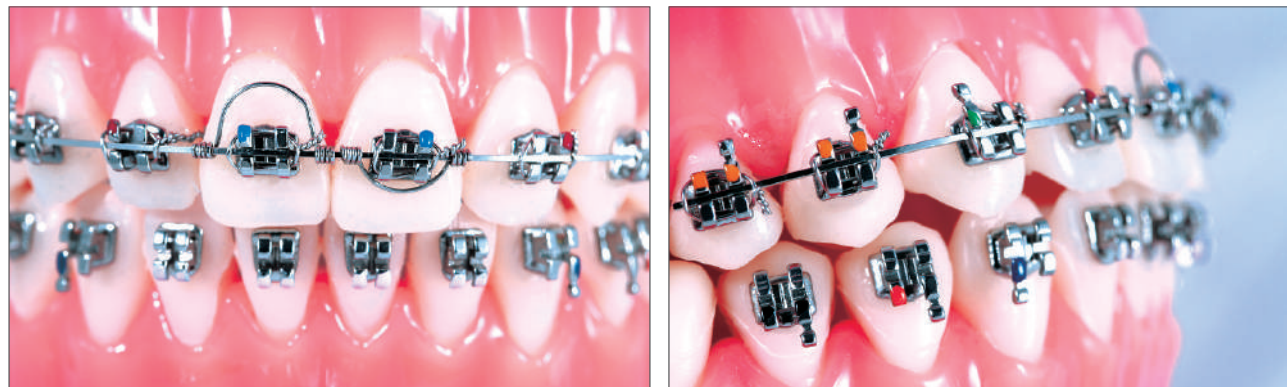


ROTH .018 / .022

	Tooth	Torque	Ang	.018 slot	.022 slot
Maxillary	Central	12°	5°	M-R18-11,21	M-R22-11,21
	Lateral	8°	9°	M-R18-12,22	M-R22-12,22
	Cuspid with Hook	-2°	11°	M-R18-13H,23H	M-R22-13H,23H
	1 st Bicuspid with Hook	-7°	0°	M-R18-14H,24H	M-R22-14H,24H
	1 st Bicuspid without Hook	-7°	0°	M-R18-14,24	M-R22-14,24
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°	M-R18-15H,25H	M-R22-15H,25H
	2 nd Bicuspid without Hook	-7°	0°	M-R18-15,25	M-R22-15,25
Mandibular	Anteriors	-1°	0°	M-R18-3412	M-R22-3412
	Cuspid with Hook	-11°	5°	M-R18-33H,43H	M-R22-33H,43H
	1 st Bicuspid with Hook	-17°	0°	M-R18-34H,44H	M-R22-34H,44H
	1 st Bicuspid without Hook	-17°	0°	M-R18-34,44	M-R22-34,44
	2 nd Bicuspid with Hook	-22°	0°	M-R18-35H,45H	M-R22-35H,45H
	2 nd Bicuspid without Hook	-22°	0°	M-R18-35,45	M-R22-35,45
Patient Kit	3X3			M-R18-300	M-R22-300
	5X5			M-R18-500(H)	M-R22-500(H)

MBT .018 / .022

	Tooth	Torque	Ang	.018 slot	.022 slot
Maxillary	Central	17°	4°	M-M18-11,21	M-M22-11,21
	Lateral	10°	8°	M-M18-12,22	M-M22-12,22
	Cuspid with Hook	0°	8°	M-M18-13H,23H	M-M22-13H,23H
	1 st Bicuspid with Hook	-7°	0°	M-M18-14H,24H	M-M22-14H,24H
	1 st Bicuspid without Hook	-7°	0°	M-M18-14,24	M-M22-14,24
	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°	M-M18-15H,25H	M-M22-15H,25H
	2 nd Bicuspid without Hook	-7°	0°	M-M18-15,25	M-M22-15,25
Mandibular	Anteriors	-6°	0°	M-M18-3412	M-M18-3412
	Cuspid with Hook	0°	3°	M-M18-33H,43H	M-M22-33H,43H
	1 st Bicuspid with Hook	-12°	2°	M-M18-34H,44H	M-M22-34H,44H
	1 st Bicuspid without Hook	-12°	2°	M-M18-34,44	M-M22-34,44
	2 nd Bicuspid with Hook	-17°	2°	M-M18-35H,45H	M-M22-35H,45H
	2 nd Bicuspid without Hook	-17°	2°	M-M18-35,45	M-M22-35,45
Patient Kit	3X3			M-M18-300	M-M22-300
	5X5			M-M18-500(H)	M-M22-500(H)


SMART ARCH WIRE

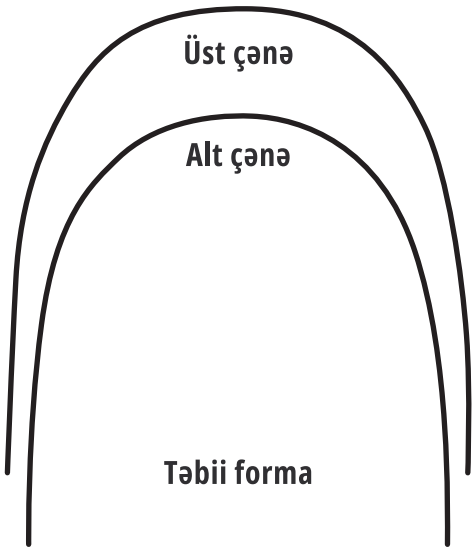

SMART NI-TI Super Elastic

- Yüksək elastikliyə və forma bərpaetmə qabiliyyətinə malik ortodontik tel
- Əyilmə, dartılma davamlılığı və transformasiya temperaturu üzrə sınaqlardan keçirilmiş yüksək keyfiyyətli Ni-Ti ərintisindən hazırlanıb
- Ortodontiyada geniş istifadə olunan Natural Form qövs formasında istehsal edilib


Size	Part Numbers	Size	Part Numbers
010	NT010U / NT010L	016X016	NT016016U / NT016016L
012	NT012U / NT012L	016X022	NT016022U / NT016022L
014	NT014U / NT014L	017X025	NT017025U / NT017025L
016	NT016U / NT016L	018X025	NT018025U / NT018025L
018	NT018U / NT018L	019X025	NT019025U / NT019025L
020	NT020U / NT020L	021X025	NT021025U / NT021025L

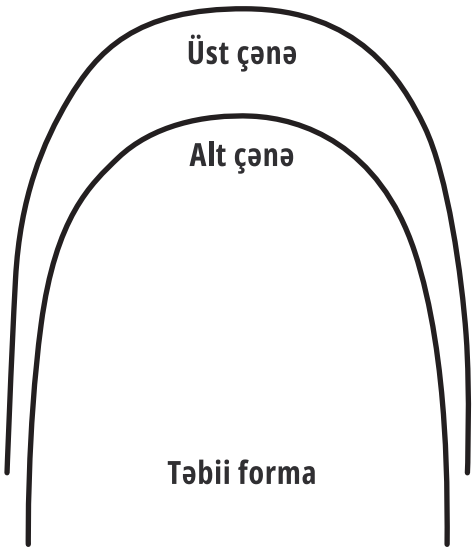

SMART COPPER NI-TI

- Mis və nikel-titan ərintisindən hazırlanıb
- 35°C temperaturda forma yaddaşı aktivləşərək ortodontik qüvvə yaradır
- Sabit və davamlı qüvvə sayəsində effektiv diş hərəkətini təmin edir


Size	Part Numbers	Size	Part Numbers
012	CNT012U / CNT012L	016X022	CNT016022U / CNT016022L
014	CNT014U / CNT014L	017X025	CNT017025U / CNT017025L
016	CNT016U / CNT016L	018X025	CNT018025U / CNT018025L
018	CNT018U / CNT018L	019X025	CNT019025U / CNT019025L

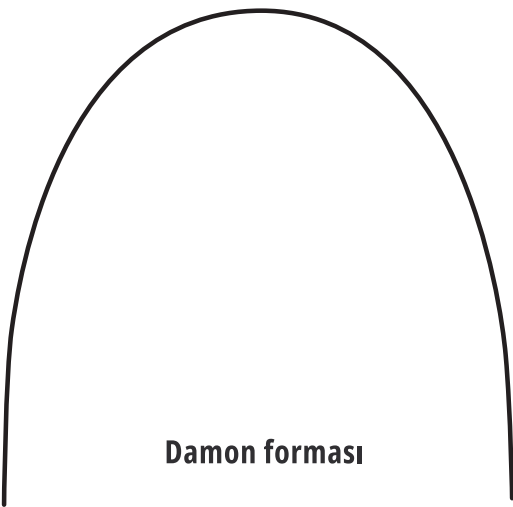

SMART DAMON COPPER NI-TI

- Self-ligating breketlər üçün uyğun qövs telləri ardıcılığı təqdim edir
- Mis və nikel-titan ərintisindən hazırlanıb
- 35°C temperaturda forma yaddaşı aktivləşərək ortodontik qüvvə yaradır
- Sabit və davamlı qüvvə ilə effektiv diş hərəkətini təmin edir

Size	Part Numbers	Size	Part Numbers
013	NT013D	014X025	CNT014025D
014	NT014D	016X025	CNT016025D
016	NT016D	018X025	CNT018025D
018	NT018D		

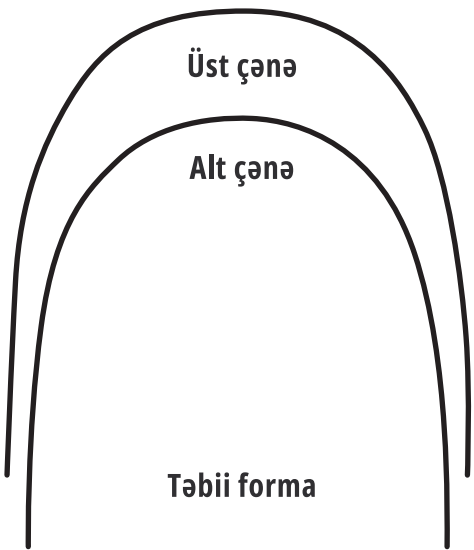

SMART STAINLESS STEEL

- Hamar səthi sayəsində sürtünməni minimuma endirir
- Dəqiq ölçü və forması tork üzərində effektiv nəzarət təmin edir
- Yüksək keyfiyyətli paslanmayan poladdan hazırlanaraq möhkəm və etibarlı performans göstərir

Size	Part Numbers	Size	Part Numbers
014	SS014U / SS014L	016X022	SS016022U / SS016022L
016	SS016U / SS016L	017X025	SS017025U / SS017025L
018	SS018U / SS018L	018X025	SS018025U / SS018025L
020	SS020U / SS020L	019X025	SS019025U / SS019025L
		021X025	SS021025U / SS021025L

LP BUCCAL TUBE

Bondable



ROTH .022


	Tooth	Torque	Offset	.022 slot
Maxillary	1 st Molars	-14°	10°	LP-R22BS-16,26
	2 nd Molars	-14°	10°	LP-R22BS-17,27
Mandibular	1 st Molars	-25°	4°	LP-R22BS-36,46
	2 nd Molars	-25°	4°	LP-R22BS-37,47

MBT .022

	Tooth	Torque	Offset	.022 slot
Maxillary	1 st Molars	-14°	10°	LP-M22BS-16,26
	2 nd Molars	-14°	10°	LP-M22BS-17,27
Mandibular	1 st Molars	-20°	0°	LP-M22BS-36,46
	2 nd Molars	-20°	0°	LP-M22BS-37,47

ATTACHMENTS

Ni-Ti Closed Coil Spring

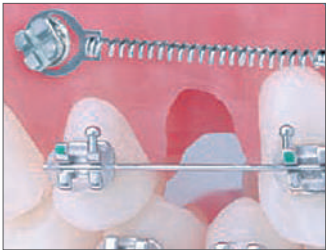

	Size	Force	
Ni-Ti Closed Coil Spring	6mm	Heavy Force	500-25
	9mm	Medium Force	500-24
	12mm	Light Force	500-23

ATTACHMENTS

Crimpable Hook

Ball Top 2.7mm
500-03
10EA/1PKG



Crimpable Hook

Ball Top 4mm
500-04
10EA/1PKG



Crimpable Hook

T Top 2.7mm
500-05
10EA/1PKG



Crimpable Hook

T Top 4mm
500-06
10EA/1PKG



Lingual Sheath

500-02
10EA/1PKG



Crimpable Stop

500-01
10EA/1PKG



Lingual Ring

500-26
10EA/1PKG



Weldable Button

500-11
10EA/1PKG



Button with Hook

500-9[Left]
500-10[Right]
10EA/1PKG



ELASTİKLƏR

Ağızdaxili istifadə üçün

- ▶ Xüsusi istehsal texnologiyası talkdan istifadəni minimuma endirir
- ▶ WBT elastikləri dəqiq formalaşdırılır və kəsilir, nəticədə sabit qüvvə təmin olunur
- ▶ Yalnız ağızdaxili istifadə standartlarına uyğun yüksək keyfiyyətli tibbi lateksdən hazırlanır



	1/8(3.2mm)	3/16(4.8mm)	1/4(6.4mm)	5/16(7.9mm)	3/8(9.5mm)
3.5oz	ELASTICS  -Apple- Order No. 760-02 • Size 1/8" 3.5oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Apple 760-02	ELASTICS  -Cacao- Order No. 770-02 • Size 3/16" 3.5oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Cacao 770-02	ELASTICS  -Lime- Order No. 780-02 • Size 1/4" 3.5oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Lime 780-02	ELASTICS  -Melon- Order No. 790-02 • Size 5/16" 3.5oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Melon 790-02	ELASTICS  -Plum- Order No. 800-02 • Size 3/8" 3.5oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Plum 800-02
4.5oz	ELASTICS  -Avocado- Order No. 760-03 • Size 1/8" 4.5oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Avocado 760-03	ELASTICS  -Cherry- Order No. 770-03 • Size 3/16" 4.5oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Cherry 770-03	ELASTICS  -Lemon- Order No. 780-03 • Size 1/4" 4.5oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Lemon 780-03	ELASTICS  -Mandarin- Order No. 790-03 • Size 5/16" 4.5oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Mandarin 790-03	ELASTICS  -Papaya- Order No. 800-03 • Size 3/8" 4.5oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Papaya 800-03
6oz	ELASTICS  -Applemango- Order No. 760-04 • Size 3/8" 6oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Applemango 760-04	ELASTICS  -Coconut- Order No. 770-04 • Size 1/8" 6oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Coconut 770-04	ELASTICS  -Litchi- Order No. 780-04 • Size 1/4" 6oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Litchi 780-04	ELASTICS  -Mangosteen- Order No. 790-04 • Size 5/16" 6oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Mangosteen 790-04	ELASTICS  -Pineapple- Order No. 800-04 • Size 3/8" 6oz 100PCS/PKG WORLD BIO TECH Pineapple 800-04

ELASTOMERIC


Control Chain



4m

Force / Color	Medium Clear	Light Clear	Medium Grey
Closed	910-01	900-01	930-01
Open	910-02		

Power Chain

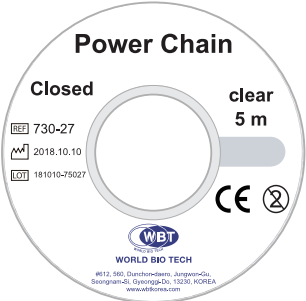

5m

Clear		Silver-Grey	
Closed	730-27	Closed	730-06
Short	740-27	Short	740-06
Long	750-27	Long	750-06

Ligature O-Ring

Grey [700-06]
Clear [700-27]
1040 EA/PKG



Separation Ring

[810-01]
1050 EA/PKG



Elastic Tubing



Clear 027 Inch 3m
[600-32]

Elastic Thread



025 Inch 7.6m [600-30]
030 Inch 7.6m [600-31]



MFU Type



Diameter	Length	Part Numbers
1.4mm	6mm	MFU14-06
	8mm	MFU14-08
	10mm	MFU14-10
	12mm	MFU14-12
	14mm	MFU14-14
1.6mm	6mm	MFU16-06
	8mm	MFU16-08
	10mm	MFU16-10
	12mm	MFU16-12
	14mm	MFU16-14
1.8mm	6mm	MFU18-06
	8mm	MFU18-08
	10mm	MFU18-10
	12mm	MFU18-12
	14mm	MFU18-14
2.0mm	6mm	MFU20-06
	8mm	MFU20-08
	10mm	MFU20-10
	12mm	MFU20-12
	14mm	MFU20-14

MFW Type



Diameter	Length	Part Numbers
1.4mm	6mm	MFW14-06
	8mm	MFW14-08
	10mm	MFW14-10
	12mm	MFW14-12
	14mm	MFW14-14
1.6mm	6mm	MFW16-06
	8mm	MFW16-08
	10mm	MFW16-10
	12mm	MFW16-12
	14mm	MFW16-14
1.8mm	6mm	MFW18-06
	8mm	MFW18-08
	10mm	MFW18-10
	12mm	MFW18-12
	14mm	MFW18-14
2.0mm	6mm	MFW20-06
	8mm	MFW20-08
	10mm	MFW20-10
	12mm	MFW20-12
	14mm	MFW20-14

- ▶ Altıbucaqlı başlıq dizaynı
- ▶ 0,020 düymədək telin yerləşdirilməsinə imkan verir
- ▶ Kəsici ucu yerləşdirmə zamanı vintə düşən yükü azaldır
- ▶ Öz-özünə deşən və yiv açan quruluşu asan tətbiq və yüksək ilkin sabitlik təmin edir
- ▶ Zəncir, O-ring və elastiklərin rahat bərkidilməsinə imkan verir

