

STRAUMANN iEXCEL™

LİDERLİK ÜÇÜN SİZE GÜC VERİR



STRAUMANN iEXCEL™

MÜKƏMMƏLLİYİNİZƏ GÜC QATIN

Straumann iEXCEL bizim ən müasir Dental Performans Sistemimizdir. Dörd implant dizaynının bir sistemdə təqdim etdiyi çoxşaxəli imkan. Tək bir protez bağlantısının sadəliyi. Zamanınıza qənaət edən rəqəmsal iş axınlar və xidmətlərin integrasiyası.

✱ ƏSL KLİNİK ÇOXŞAXƏLİK

Bir alət dəstində dörd implant dizaynı ilə, hətta cərrahiyyə zamanı belə əksər klinik hallarda düzgün seçimi etmək imkanınız olur. SLAactive səthi siqaret çəkənlərdə, şəkərli diabeti və ya radiasiya terapiyası alan xəstələrdə belə uğurlu nəticə əldə etməyə kömək edir.¹⁻³

✱ SEVƏCƏYİNİZ SADƏLİK


Bütün implant dizaynları üçün vahid TorcFit bağlantısı. Bütün protezlərdə eyni diametr. Orijinal Straumann məhsulları və fərdiləşdirilmiş protezlərin tam çeşidi ilə restorativ sadəliyin faydasını yaşayın.

✱ BİRLƏŞMİŞ STOMATOLOGİYA İLƏ MÜKƏMMƏLLİYƏTƏ GEDƏN YOL

Sistemimiz integrasiya olunmuş rəqəmsal iş axınlarını və xidmətləri təqdim edərək tək implantdan tam qövs bərpalarına qədər proqnozlaşdırılan, səmərəli və yüksək keyfiyyətli nəticələr əldə etməyə imkan yaradır.

84%

iEXCEL sistemini sınaayan həkimlər
ondan daimi istifadə etməyə keçəcəklərini bildirənlərin faizi.

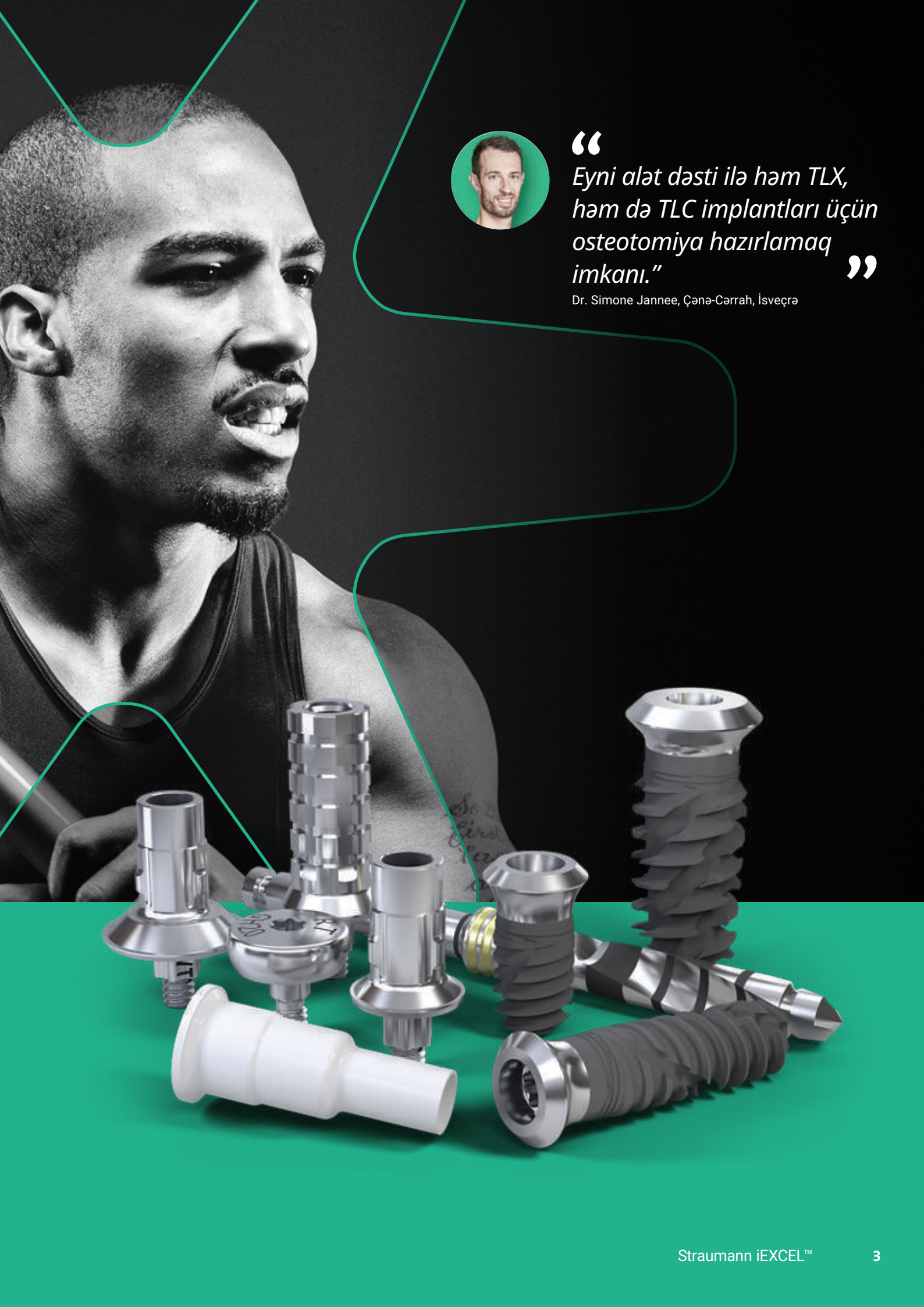

“
Eyni alət dəsti ilə həm TLX,
həm də TLC implantları üçün
osteotomiya hazırlamaq
imkanı.”
”

Dr. Simone Jannee, Çənə-Cərrah, İsveçrə

BİR-DÖRT-BİR **ƏSL** KLİNİK ÇOXŞAXƏLİK

✱ BİR ALƏT DƏSTİ

Artıq implant seçiminizi həтта əməliyyat zamanı da edə bilərsiniz.
Tək bir alət dəsti bütün Straumann iEXCEL implant dizaynları ilə işləyir.

✱ DÖRD İMPLANT DİZAYNI

Bir sistem daxilində dörd implant dizaynı ilə demək olar ki, bütün klinik vəziyyətlərdə müalicəni təmin etmək və dərhal protokolları tətbiq etmək mümkündür.

BLX və TLX: DƏRHAL UĞUR

Dinamik Sümük İdarəetməsi sayəsində unikal implant dizaynımız çətin çəkilmə sahələrində, defektli sahələrdə və ya yumşaq sümükdə belə dərhal protokolları mümkün və etibarlı edir.

BLC və TLC: BÜTÜN GÖSTƏRİŞLƏRDƏ ETİBARLI

İncə uca malik yeni nəsil konik implantlarımız minimal invaziv müalicələr, asan yerləşdirmə və yüksək ilkin sabitlik üçün nəzərdə tutulub.

✱ BİR ÖLÇÜ PROTEZ BAĞLANTISI

Eyni protez bağlantısı bütün implant diametrlərində tətbiq olunur və protez ehtiyatlarının idarəsini sadələşdirir.





Straumann® SLActive® səthi


Siqaret çəkənlərdə, şəkərli diabetli və ya radiasiya terapiyası alan xəstələrdə belə implantın 100% sağ qalma göstəricisini sübut edir.¹⁻³



Straumann® Roxolid® ərintisi

Titanla müqayisədə daha güclü və bioloji üstün materialdır. Daha az invaziv və sümük qoruyucu müalicə imkanları yaradır, daha kiçik amma daha güclü implantlardan istifadə etməyə şərait yaradır.⁴⁻⁷



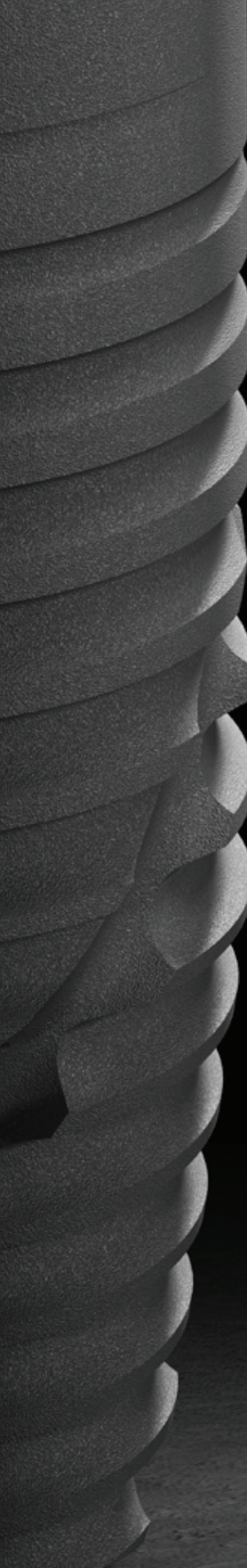

BÜTÜN KLİNİK GÖSTƏRİŞLƏRDƏ GÜVƏN **C-DESIGN**

- Yeni nəsil konik implantlarımız daha az invaziv müalicələrə imkan yaradır. Azaldılmış **3,75 mm diametr** sayəsində **bütün diş mövqelərində** tətbiq olunur. Bunun üçün Roxolid® materialı və TorcFi™ protez bağlantısı birlikdə işləyir.
- **İncə ucluqları** sayəsində BLC və TLC implantlarıdır dişarası sahələrdə və məhdud anatomiyalı pasiyentlər üçün ideal seçimdir.
- İkiqat yiv sistemi implantın daha **sürətli yerləşdirilməsini** təmin edir. Genişləndirilmiş kəsici kanallar isə əvvəlcədən yiv açma ehtiyacını aradan qaldıraraq yerləşdirmə prosesini asanlaşdırır.

DƏRHAL NƏTİCƏLƏR ÜÇÜN **X-DESIGN**

- Tam konik implant dizaynımız **Dinamik Sümük İdarəetməsi** ilə birlikdə dərhal protokolları mümkün və etibarlı edir – hətta çətin hallarda belə.
- Əlavə **qısa implantlar** BLX 6 mm və TLX 6 mm sümük hündürlüyünün minimal olduğu hallarda etibarlı müalicə variantıdır və sinus lift və ya vertikal artırma ehtiyacını aradan qaldıra bilər.
- İmplantın kəsici xüsusiyyətləri yerləşdirmə zamanı **istiqamətə nəzarət imkanı** verir və optimal mövqə əldə etməyə kömək edir.

SEÇİN. QARIŞDIRIN. LİDER OLUN

SÜMÜK SƏVİYYƏSİ

Straumann® Bone Level implantları təbii görünüş və hiss üçün nəzərdə tutulub. Consistent Emergence Profiles® yumşaq toxuma idarəetməsi sayəsində üstün estetik nəticələr təmin edir. Artıq Straumann iEXCEL® ilə əməliyyat zamanı xəstələrin əksər klinik vəziyyətlərini həll etmək üçün iki sümük səviyyəli dizayndan seçim etmək mümkündür.

BLC və BLX Ø 3,75 mm bütün diş mövqelərində istifadə oluna bilər. Bu, sümük qorunmasını və yüksək estetik nəticələri təmin edir.

BLC ÜSTÜNLÜKLƏRİ

1 HƏSSAS KORTİKAL HAZIRLIQ

Krestal sümüyün düzgün hazırlanması üçün qüsursuz şəkildə uyğunlaşan profil frezləri.

2 KONİK DIZAYN

Sümükdə az hazırlıq aparılmasını mümkün edir və yüksək implant sabitliyi təmin edir.

3 GENİŞLƏNDİRİLMİŞ KƏSİCİ KANALLAR

Özünü kəsən və yiv açma xüsusiyyətləri əvvəlcədən yiv açma ehtiyacını aradan qaldırır.

4 İNCƏ UC

Birləşmiş kök ucları, üz altı çıxıntılar və ya dar atrofik krestlər kimi məhdud anatomiya halları üçün.

BLX ÜSTÜNLÜKLƏRİ

1 AZALDILMIŞ BOYUN DİAMETRİ

Krestal sümüyə düşən yükü azaldır və implantın daha rahat yerləşdirilməsini təmin edir.

2 DƏYİŞKƏN YİV DİZAYNI

Nazik və irəliləyən yivlər implantın yüksək sabitliyini təmin edir.

3 İKİ İSTİQAMƏTLİ KƏSİCİ ELEMENTLƏR

Yerləşdirmə zamanı istiqamətə nəzarət edərək optimal protez mövqeyinə imkan yaradır.


4 DƏRİN APİKAL YİVLƏR

Dərhal tutunma və sabitliyi artırmaq üçün geniş lövbər səthi yaradır.


	Ø 3.3 mm	Ø 3.5 mm	Ø 3.75 mm	Ø 4.0 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.5 mm	Ø 6.5 mm
BLC	✓		✓		✓		✓	✓
BLX		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uzunluq	8 – 18mm	8 – 18mm	6 – 18mm	6 – 18mm	6 – 18mm	6 – 18mm	6 – 16mm	6 – 16mm

BLC IMPLANT

BLX IMPLANT

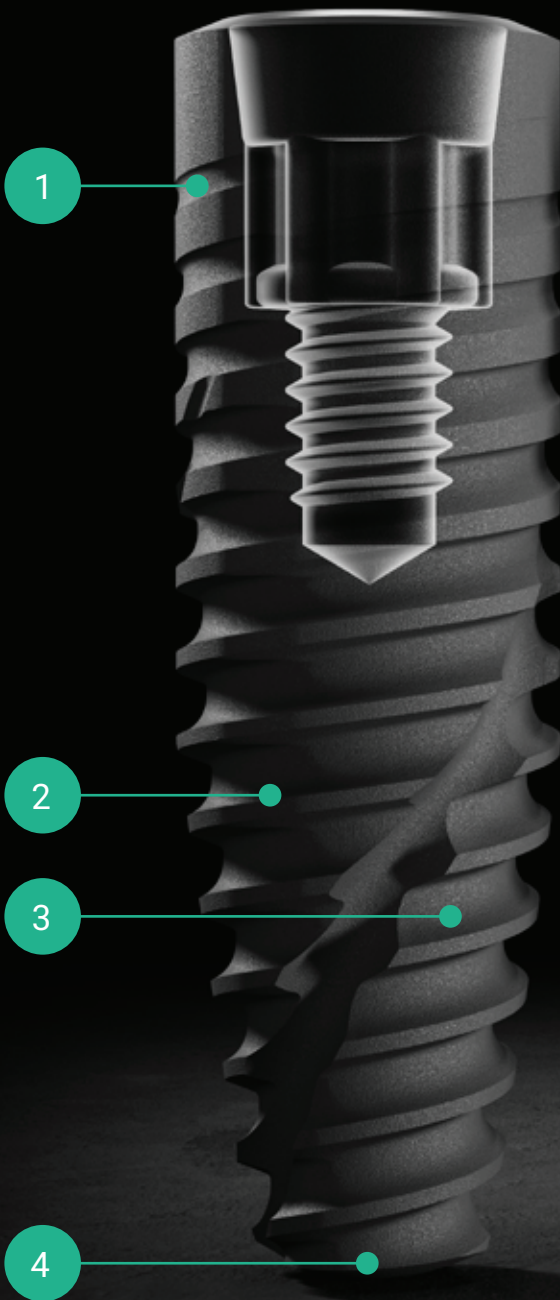

SLActive®
Roxolid®

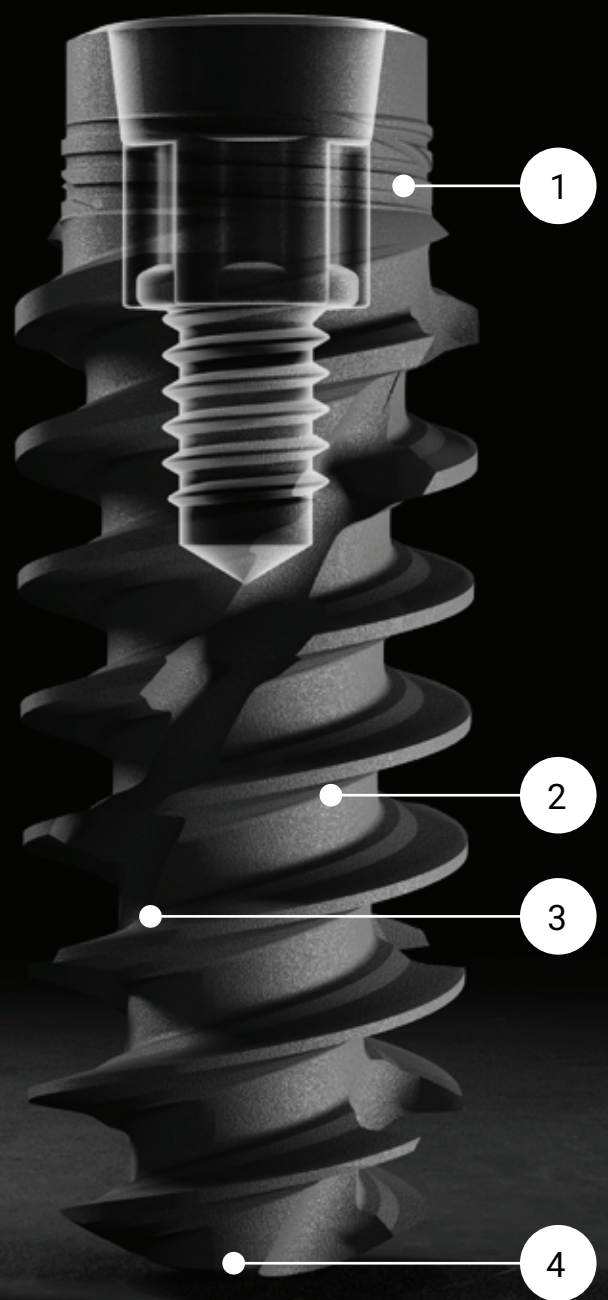

SEÇİN. QARIŞDIRIN. LİDER OLUN

TOXUMA SƏVİYYƏSİ

Straumann iEXCEL™ Tissue Level implantları sərt və yumşaq toxuma sağlmasının əsas bioloji prinsiplərini izləyir. Onlar implant–abutmentin terfeysinin sümük səviyyəsindən kənara çıxarılması ilə iltihab və sümük rezorbsiyası riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq üçün hazırlanıb. Protez platformasının sümük səviyyəsindən yuxarı yerləşdirilməsi posterior hissədə belə daha yaxşı görünülük və əlçatanlıq təmin edir.

Tissue Level implantlar parodontal problemləri olan pasiyentlər üçün yaxşı seçimdir.

TLC XÜSUSİYYƏTLƏRİ

1 DƏQİQ KORTİKAL HAZIRLIQ

Perfectly matching profile drills for accurate preparation of the crestal bone.

2 KONİK DİZAYN

Enables under-preparation of the bone and ensures high implant stability.

3 GENİŞLƏNMİŞ KƏSİCİ KANALLAR

Self tapping properties remove the need for tapping.

4 İNCƏ UC

For patient's limited anatomy, such as converging root tips, facial undercuts or narrow atrophied ridges.

TLX XÜSUSİYYƏTLƏRİ

1 AZALDILMIŞ BOYUN DİAMETRİ

Krestal sümüyə düşən yükü azaldır və implantın yerləşdirilməsini asanlaşdırır.

2 DƏYİŞKƏN YİV DİZAYNI

İncə və irəliləyən yivlər implantın yüksək sabitliyini təmin edir.

3 İKİ İSTİQAMƏTLİ KƏSİCİ ELEMENTLƏR

Yerləşdirmə zamanı istiqamətə nəzarət edərək optimal protez mövqeyinə imkan yaradır.

4 DƏRİN APİKAL YİVLƏR

Dərhal tutunma və sabitliyi artırmaq üçün geniş lövbər səthi yaradır.

	Ø 3.3 mm	Ø 3.75 mm	Ø 4.5 mm	Ø 5.5 mm	Ø 6.5 mm
TLC	✓	✓	✓	✓	✓
TLX		✓	✓	✓	✓
Uzunluq	8 – 18 mm	6 – 18 mm	6 – 18 mm	6 – 16 mm (TLC) 6 – 12 mm (TLX)	6 – 16 mm (TLC) 6 – 12 mm (TLX)

TLC IMPLANT

TLX IMPLANT

Straumann®
Tissue Level implantları
həm genişlənmiş,
həm də düz dizaynda
mövcuddur.

SLActive®

Roxolid®

MODUL KASET VƏ VELODRILL SİSTEMİ™

BİR ALƏT DƏSTİ

✱ **STRAUMANN® MODULAR SETİ**

Straumann® Modular Seti – kiçik, kompakt alət dəstidir. Müxtəlif modullarla birləşdirilərək sizin ehtiyaclarınıza uyğunlaşdırılır.

- Modul A: universal və protez alətləri üçün
- Modul B: iş axını və frezlər üçün – bütün iEXCEL implantları ilə işləyən vahid parça
- Modul C: əlavə cərrahi rəhbər (handllar) və ya sadə köməkçi qutular üçün

✱ **STRAUMANN® VELODRILL™**

ELASTİK. SADƏ. EFFEKTİV.

VeloDrill™ sistemi bütün Straumann® iEXCEL implant dizaynları ilə uyğunlaşan tək bir frez dəstinə istifadə etməyə şərait yaradır.

ELASTİK


Sərbəst və cərrahi rəhbər ilə istifadəyə uyğun, həm X, həm də C dizaynları ilə işləyir.

SADƏ

Diametrlərin asan müəyyən edilməsi üçün frezlər rənglə kodlaşdırılıb.

EFFEKTİV (COOL)

Aşağı temperaturda qazma aparılır, ətraf toxumaların həddindən artıq qızmasının qarşısını alır.

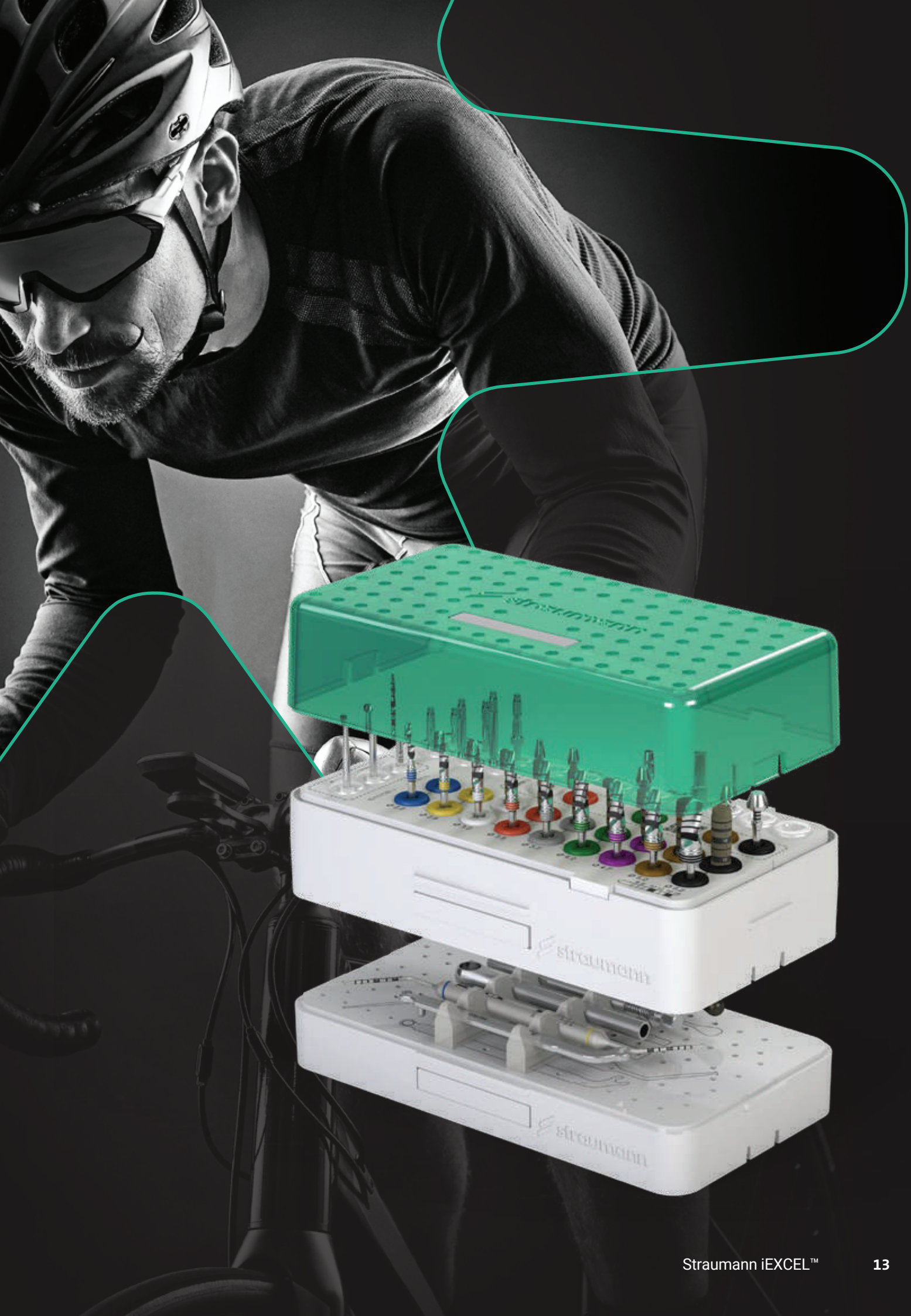

HƏDD YOXDUR. SADƏCƏ SEÇİM VAR

SEVƏCƏYİNİZ SADƏLİK





“

*BLX-dən 5 illik istifadəmdən sonra
deyə bilərəm ki, TorcFit™ bağlantısı
möhtəşəmdir – krestal sümük
sabitliyi əladır.*

”

Dr. Algirdas Puisys, Parodontoloq, Litva

TORCFIT™ BAĞLANTISI

TORX İNDEKSİNİN GÜCÜ

- Yüksək fırlanma momentlərinin
ötürülməsinə imkan verir
- 6 mövqeli elastik implant
abutment uyğunluğu

7° KONİK BAĞLANTININ DƏQİQ UYGUNLUĞU

- İmplant və abutment arasında
dəqiq uyğunluq
- Abutment vintinin implantla
bağlanması yalnız abutment
düzgün yerləşdirildikdə mümkün olur
- Düzgün yerləşdirilən abutmentlər
sürtünmə ilə möhkəm sabitlənir
- Yüksək mexaniki sabitlik və gərginliyin
optimal paylanması təmin edilir

BÜTÜN İMPLANTLAR ÜÇÜN EYNI ÖLÇÜ PROSTETİK BAĞLANTI

- Bütün implantlar üçün vahid
bağlantı
- Daha az protez inventarı
- Daha sadə personal təlimi

STRAUMANN PRO ARCH™

TAM ÇƏNƏDƏ LİDER OLUN

Straumann iEXCEL ən son stomatoloji performans sistemimiz – indi Straumann Pro Arch™ ilə daha yüksək effektivlik və çoxşaxəlilik təqdim edir. Dörd implant dizaynı bir alət dəstində birləşdirilib. Roxolid® və SLActive® kimi elmi əsaslı texnologiyalar və integrasiya olunmuş rəqəmsal iş axınları həkimlərə proqnozlaşdırılan nəticələr, çətin klinik hallarda rahatlıq və praktikada səmərəlilik gətirir.

✱ XƏSTƏYƏ YÖNƏLİ ÇOXŞAXƏLİLİK

Bone və Tissue Level implantlar

- Uzunluq: 6 mm-dən 18 mm-ə qədər
- Diametr: Ø 3.3 mm-dən Ø 6.5 mm-ə qədər



SLActive® Roxolid®




✱ ÇƏTİN HALLAR ÜÇÜN SADƏLİK

- Tək bağlantı
- Tək alət dəsti
- Qısa cərrahi protokollar

✱ RƏQƏMSAL TAM ÇƏNƏ

- Smilecloud
- Straumann® Smile in a Box®
- Straumann® RevEX™
- Straumann EXACT™
- Straumann UNIQ™

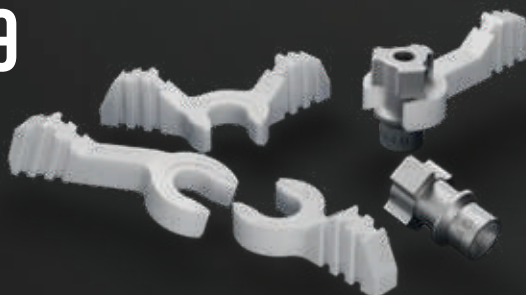

1 DAR İMPLANTLAR

Ø 3.3 mm BLC və Ø 3.5 mm BLX implantları Roxolid® materialı ilə sümüyü qoruyur və sümük transplantasiyasının qarşısını alır.

2 QISA İMPLANTLAR

BLX, TLX, BLC və TLC 6 mm implantlar sümük hündürlüyünün minimal olduğu hallarda sinus lift və ya vertikal artırma ehtiyacını aradan qaldıra bilər.

3 KİÇİK ÇAPI OLAN İMPLANT

Ø 3.75 mm bütün diş mövqelərində invazivliyi azaltmaq və sümüyü qorumaq üçün istifadə oluna bilər.

4 YUVARLAQ BUCAXLI ABUTMENT

Yumşaq toxuma üçün maksimal sahə yaratmaq məqsədilə dizayn olunub. Tissue level implantlar üçün 17° və 30° bucaq altında abutmentlər mövcuddur.

5 STRAUMANN UNIQ™*

Geniş çubuq (bar) portfeli.

*Mövcudluq regiondan asılı olaraq dəyişir; ətraflı məlumat üçün yerli komanda ilə əlaqə saxlayın.

LİDERLİYƏ SÜRÜKLƏNİN

SİZ VƏ PASİYENTLƏRİNİZ ÜÇÜN

Straumann geniş məhsul, həll və xidmət çeşidi ilə implant, protez və regenerativ stomatologiyada global bazarda liderdir. Rəqəmsal və fasiləsiz iş axınlarına fokuslanan Straumann müştəriyəmərkəzli tam müalicə təcrübəsi təqdim edir.


İnteqrasiya olunmuş ekosistem stomatoloqlara səmərəlilik, rahatlıq və əməkdaşlıq, eyni zamanda təhlükəsiz məlumat saxlanması və paylaşımı, eləcə də sübutlara əsaslanan və məlumat yönümlü prosesləri təmin edir.

Straumann markası 100-dən çox ölkədə mövcuddur və İsveçrə keyfiyyəti, dəqiqliyi və innovasiyası ilə assosiasiya olunur. Dünyanın ən böyük elmi şəbəkəsi və ITI (International Team for Implantology) ilə əməkdaşlıq sayəsində stomatoloqlar arasında etibarlılığı artırır.



Straumann® dünyanın ən böyük implant istehsalçı qrupu olan Strauman Group-un aparıcı brendidir. Dünyanın ən ikonik stomatoloji markalarından biri kimi, bu sahədə mühüm irəliləyişlərin lideri olmuşuq.

Biz stomatoloji xidmətin miqyasını genişləndirmək üçün daim və davamlı olaraq mükəmməllik və transformasiyaedici innovasiyalar təqdim etməklə, qabaqcıl peşəkar diş həkimlərindən ibarət global icmaya xidmət edirik.

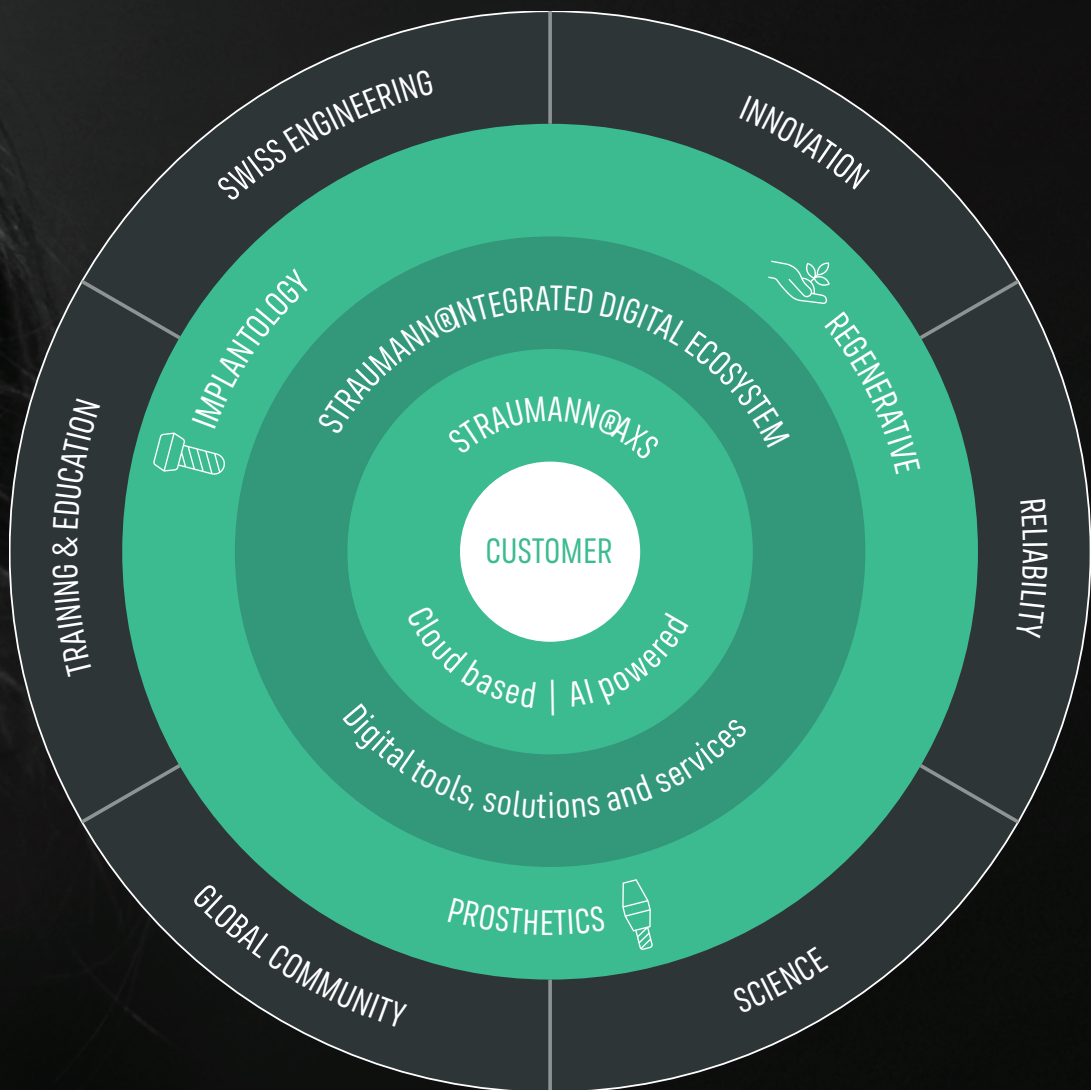

STRAUMANN iEXCEL™ – SİZİ DAHA YÜKSƏKLƏRƏ DAŞIYIR

- Straumann iEXCEL bizim ən mükəmməl Stomatoloji Performans Sistemimizdir
- Dörd müxtəlif implant dizaynının vahid bir sistemdə çoxşaxəli istifadəsi
- Bir protez bağlantısının sadəliyi
- Vaxtınıza qənaət etməyə kömək edən integrasiya olunmuş rəqəmsal iş axınları və xidmətlər

adentta

Ünvan: Həsən Əliyev 82 F, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994) 12 525 11 17

Mob: (+994) 55 409 98 78

Email: info@adentta.az

📍 📞 📧 adentta.az

Straumann BLT/TL implantları yüksək dəqiqlik, ilkin sabitlik və uzunmüddətli etibarlılıq təmin etmək məqsədilə hazırlanmışdır. Dünya üzrə minlərlə stomatoloqun seçimidir və klinik uğurlar, innovasiya və pasiyent məmnuniyyəti ilə seçilir.